

GT

Dettagli del modello GT

La sedia GT propone una struttura formata da un sottotelaio che ospita la ciclistica e un telaio superiore ergonomico che ospita le funzioni di articolazione e ammortizzamento.

Il tutto per donare estrema versatilità e modularità ad una sedia che può accogliere anche una configurazione trike elettrica.

parafango

leva sblocco/blocco seduta

ruota 24"

freno

supporti da 1" adattati per manurio bici

maniglie mobili

leva sblocco/blocco schienale

Carniera "schienale"

leva sblocco/blocco maniglie mobili

Carniera "ginocchio"

molle a gas

Aggancio trike

Carniera "caviglia"

Pedana con copertura in plastica 3D



GT

Il Modello GT può collegarsi ad un monociclo trike dedicato.

dopo l'aggancio e il blocco con l'apposita chiusura, si possono azionare le maniglie della sedia per elevare ed inclinare la seduta.

ancoraggio per luci da manubrio bici

ancoraggio batterie


pneumatico max 20" e sezione 3.0



Versatile

GT e' stata ideata per essere versatile. un unico telaio capace di supportare diverse configurazioni,


- a : Monociclo elettrico con ruota 20" ad alte prestazioni
- b : trike agganciato con seduta inclinata in avanti per trasferire il carico
- c : trike agganciato con seduta in posizione bassa (standard)
- d : Gt in posizione normale
- e : Gt con schienale di riposo azionato
- f : Gt con seduta in elevazione verticale

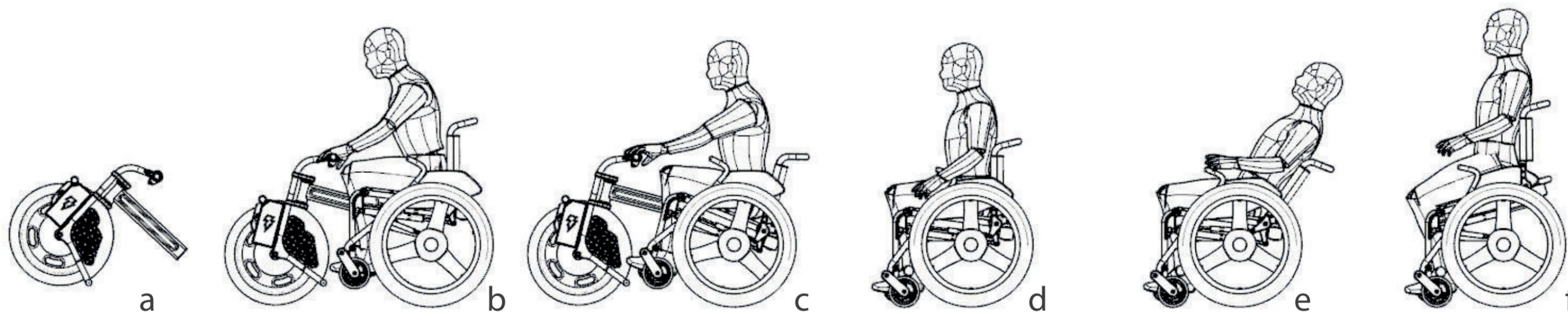

a

Monociclo elettrico con ruota 20" ad alte prestazioni

Il monociclo elettrificato avrà la possibilità di montare ruote di grande diametro e sezione (20") con una forcella a doppia piastra robusta e versatile


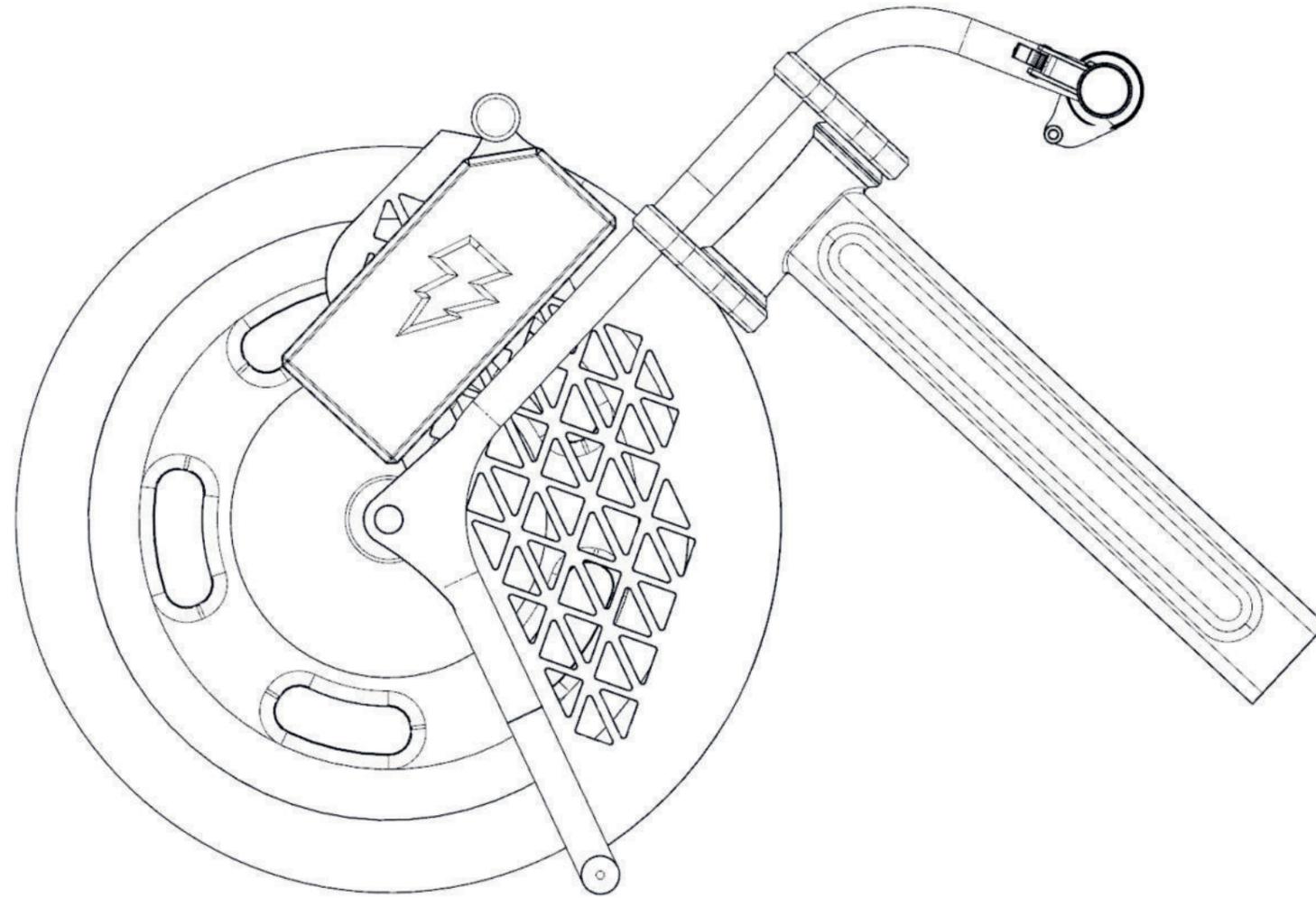


b

trike agganciato con seduta inclinata in avanti per trasferire il carico

Il Monociclo si aggancia alla sedia tramite un meccanismo che può essere sia auto-sollevante, oppure azionato manualmente.


Già inoltre si può inclinare in avanti per trasferire il carico sulla ruota anteriore e aumentare la trazione.

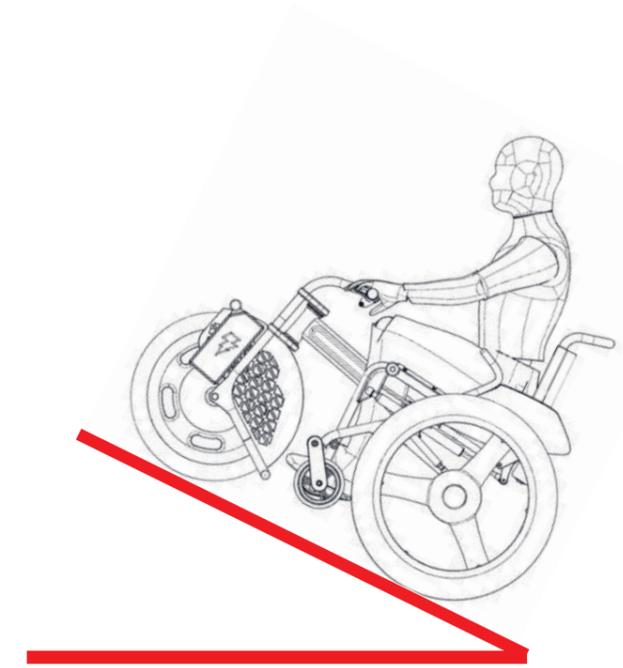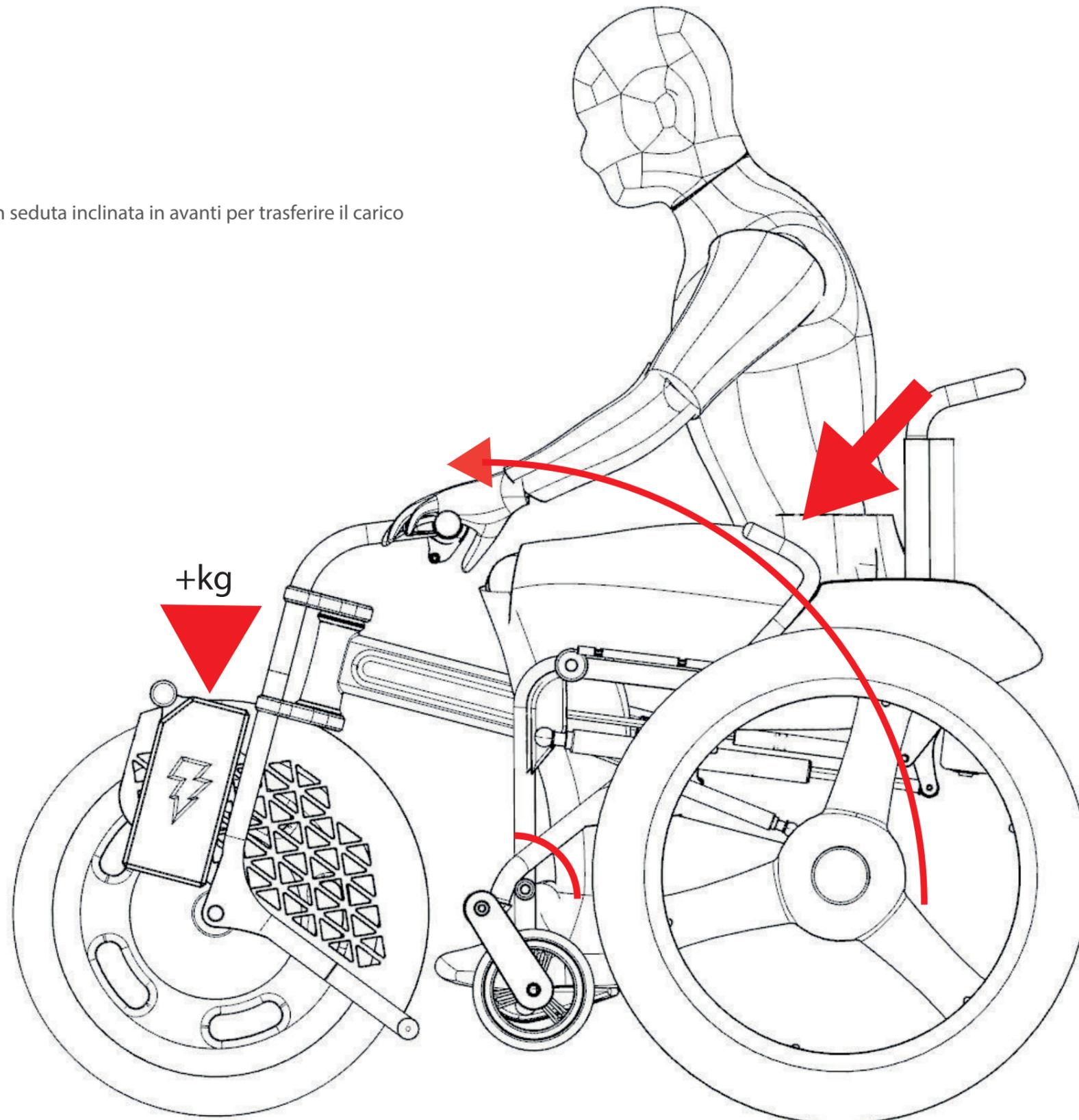

C


trike agganciato con seduta in posizione bassa (standard)

Gt puo' agganciarsi al Monociclo anche in posizione standard, per trasferire il carico sulle ruote posteriori e alleggerire la pressione sulla ruota sterzante.

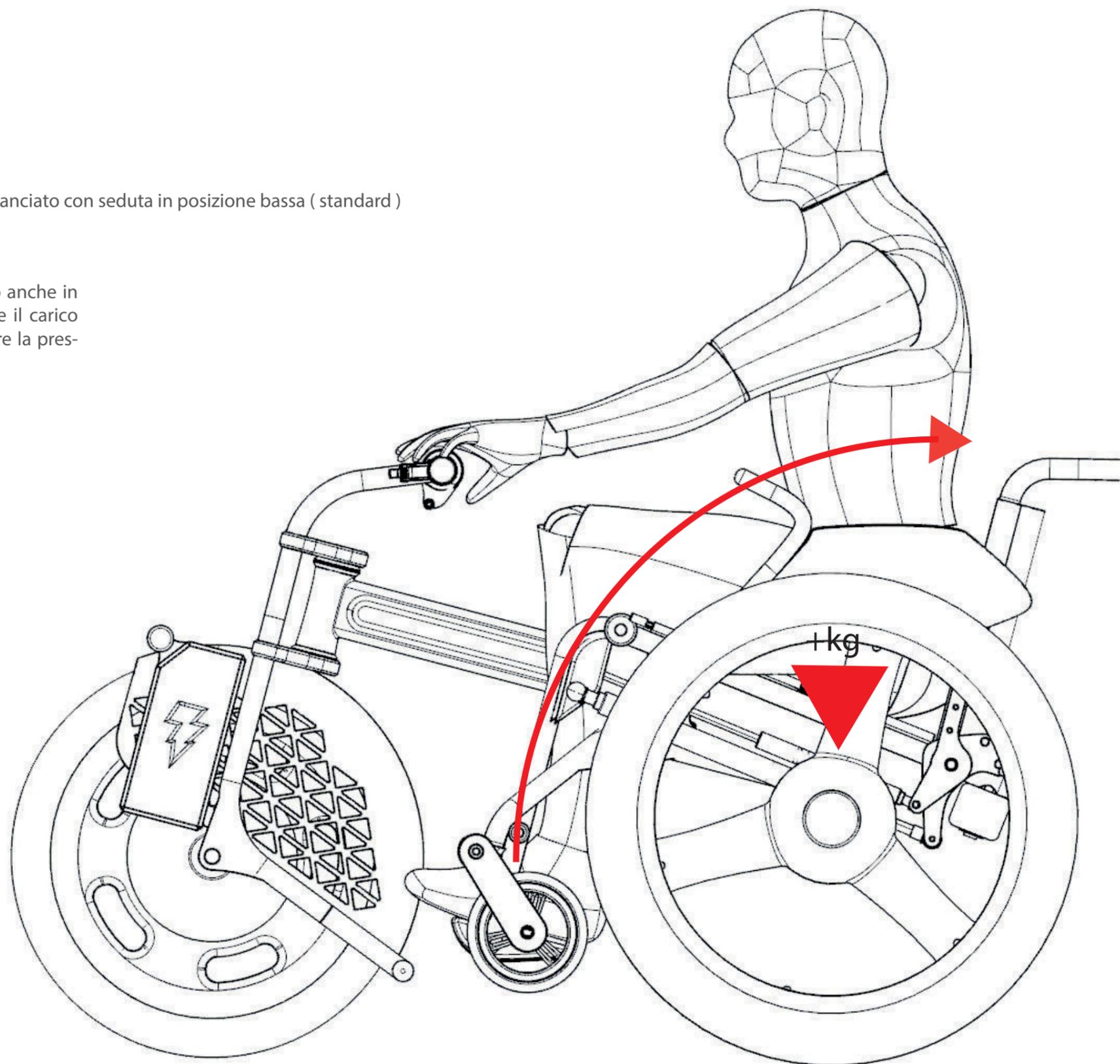

d


Gt in posizione normale

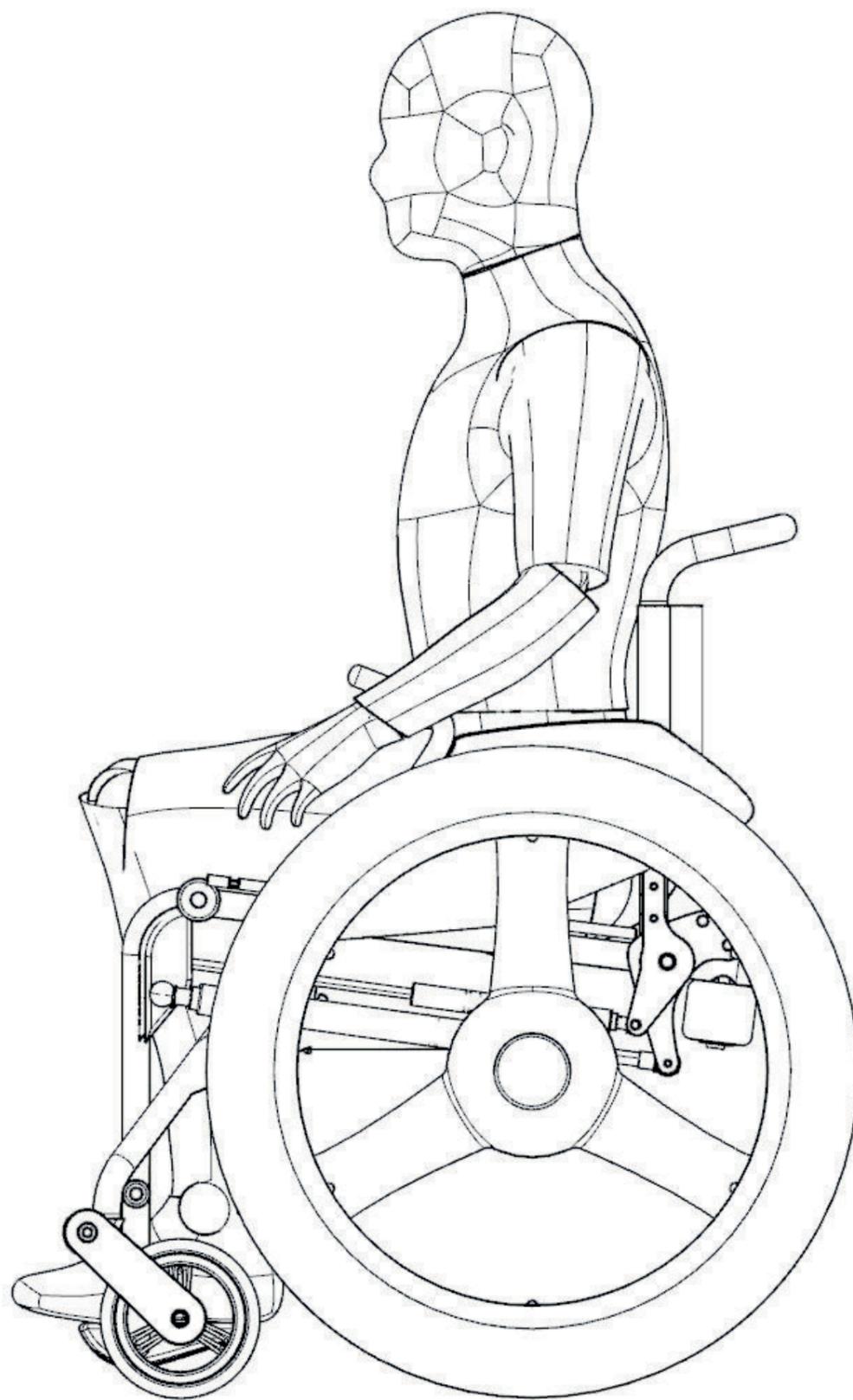

e

Gt con schienale di riposo azionato

Lo schienale puo' essere reclinato per permettere di cambiare posizione. L'azionamento puo' essere elastico oppure con blocco (per mantenere lo schinale nella posizione piu' bassa)

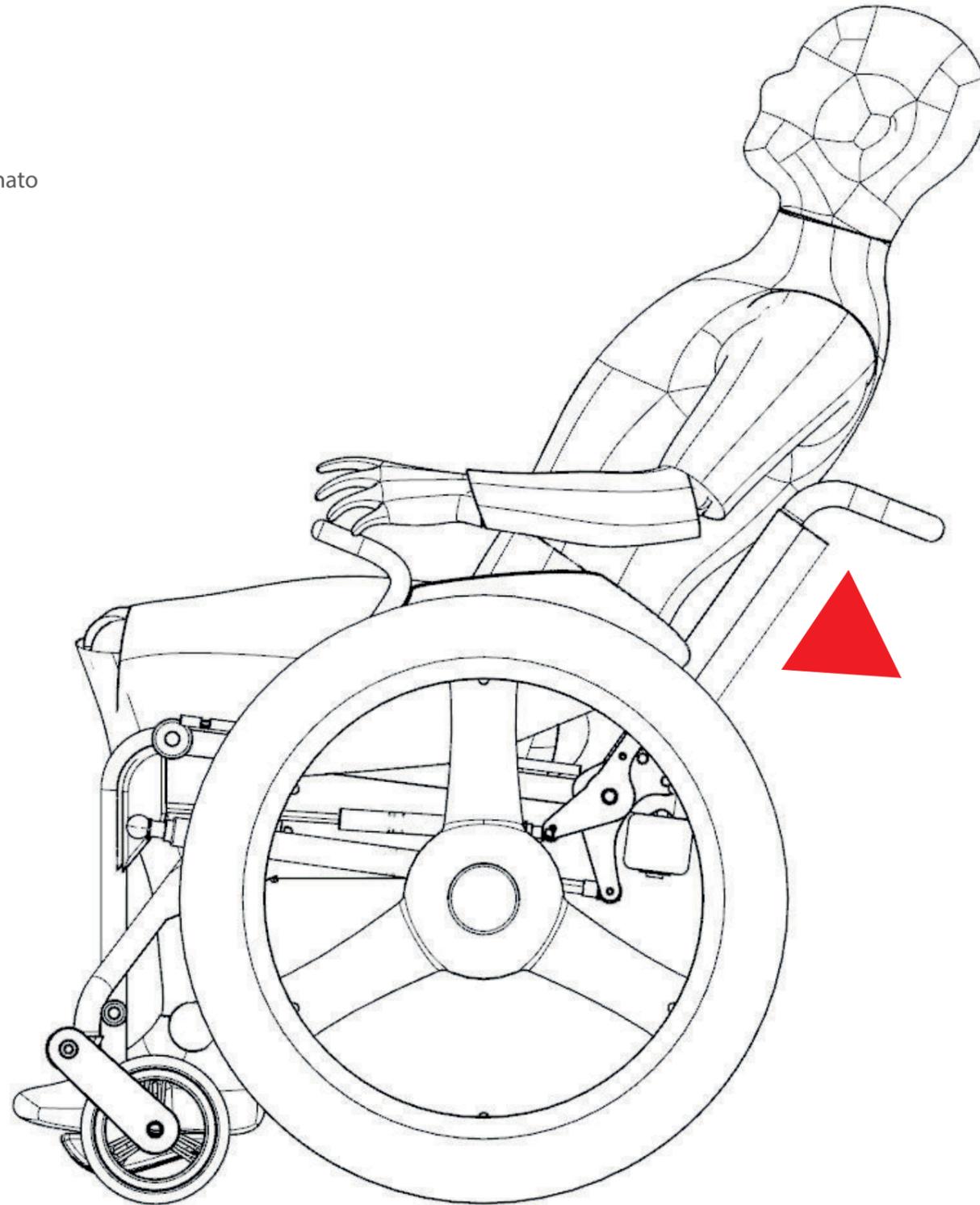

e

Gt con schienale di riposo azionato


Le maniglie che azionano l'aggancio auto-sollevante del Monociclo sono allo stesso tempo appigli per variare la posizione di seduta e robusti supporti per i Parafanghi di protezione in carbonio



f

Gt con seduta in elevazione verticale


Le molte articolazioni di GT permettono anche l'elevazione verticale, anche in questo caso le maniglie laterali aiutano a raggiungere manualmente la posizione più alta. Tutte le configurazioni che includono un notevole cambiamento del Baricentro necessitano di cinghie di sicurezza a livello delle ginocchia e del busto.

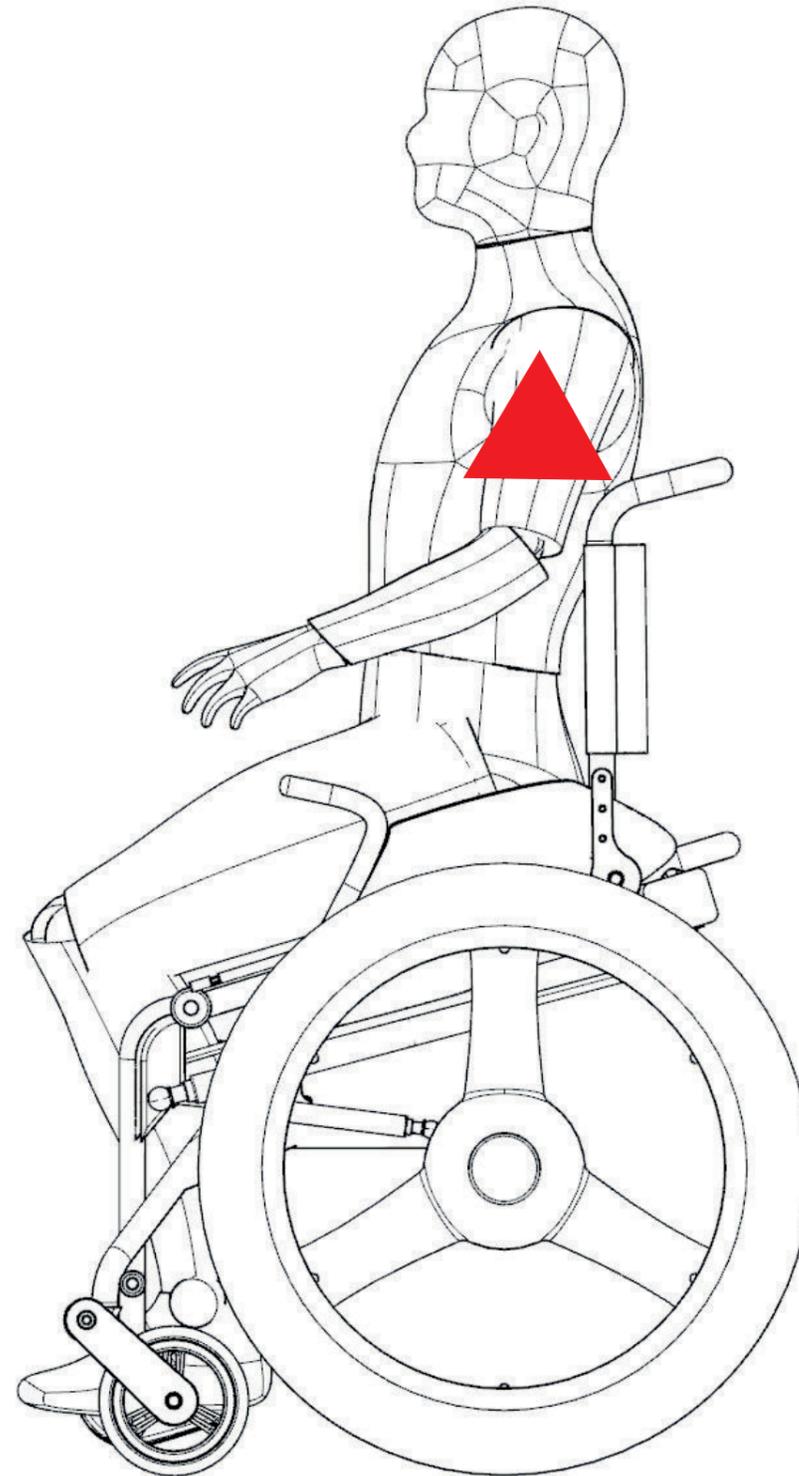

f

Gt con seduta in elevazione verticale



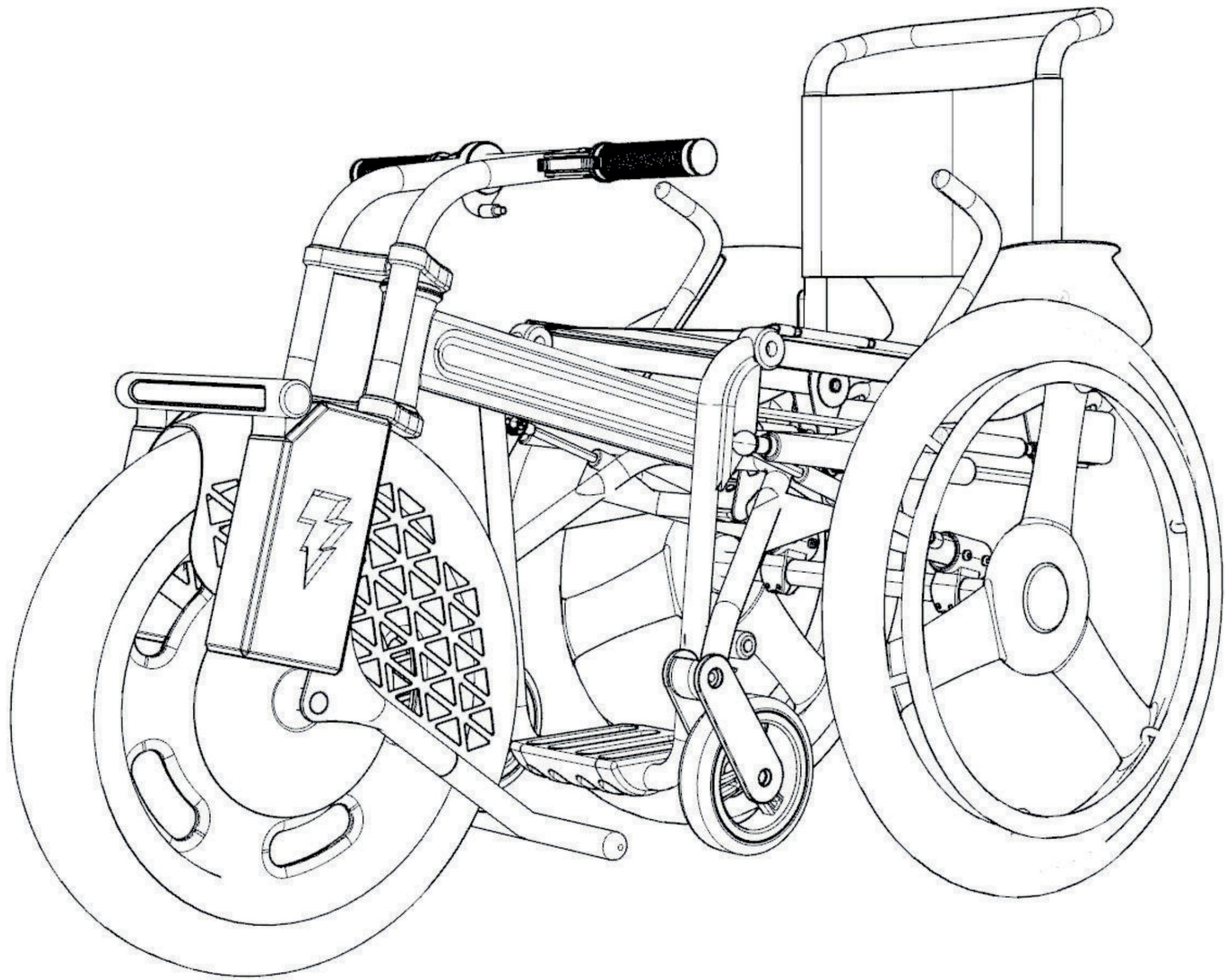

GT

configurazione Trike

